


緊張・興奮・リラックスなど、人の感情を測定する

皮膚電気反応計

TS02 GSR-AD

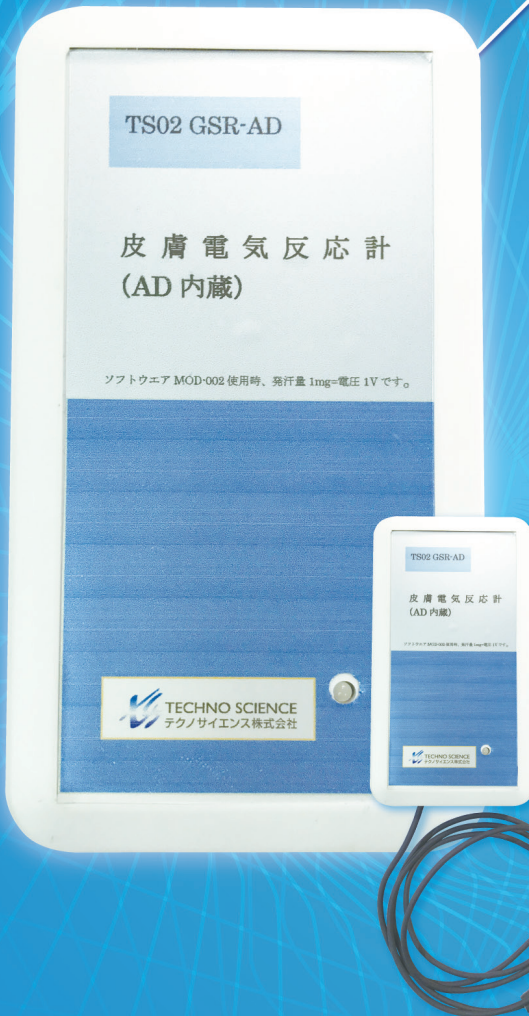

皮膚電位計

TS02 SPL/R-AD




皮膚電気反応計、および皮膚電位計はエクリン汗腺の電気活動を測定し、心理的な動揺を数値化、またグラフ化するものです。GSR(皮膚電気反応)は精神性発汗の指標として用いられます。SPL/Rは、SPL(皮膚電気活動の直流成分)、SPR(皮膚電気活動の交流成分)の2成分を出力し、SPLは覚醒水準の指標、SPRは聴覚・視覚・痛覚などの刺激に対する反応として観察することができます。

*旧モデル「SPL」また「SPL-AD」は「皮膚電気反応計 TS02 GSR (AD 付きは GSR-AD)」と名称変更しました。

弊社の TS02 GSR-AD, また SPL/R-AD は、AD 変換機内蔵でソフトウェアも付属しています。USB ケーブルでお手持ちの PC と接続し、すぐに測定を開始できます。

- ◆ アナログ出力モデルも用意しています。
- ◆ ソフトウェア「MOD-002」

CSV 形式で保存、マーカー機能有。
解析機能～最大、平均値の計算。動作環境—Windows7 以上推奨。

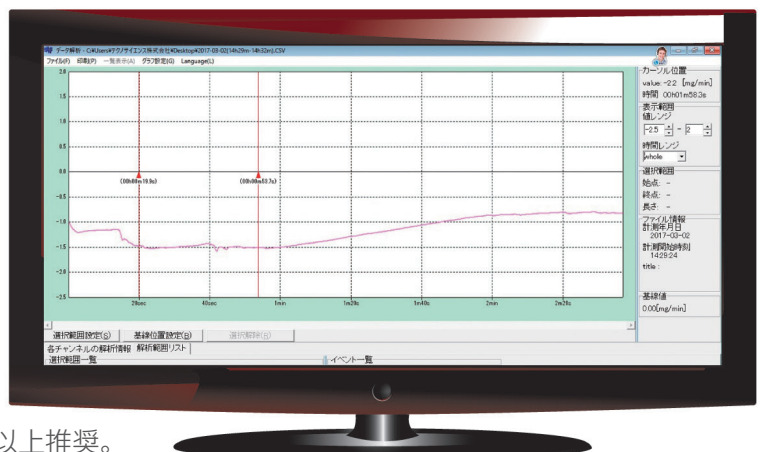

様々な分野で応用できる

・心理学分野・



ストレス、リラックス効果

・覚醒水準の測定・



睡眠深度の測定など

・音、におい、視覚刺激による反応・



CMなどの映像効果、
香料の効果判定など。

■ 商品仕様

形式(TS02は省略)	測定チャンネル数	出力	ソフトウェア
GSR	1	アナログ (BNC)	×
GSR-AD	1	USB	○
SPL/R	2	アナログ (BNC)	×
SPL/R-AD	2	USB	○

本体サイズ：75x30x134mm 電源：単三乾電池 x 2

◆ ソフトウェアについて

ソフトウェアは Windows 専用 (win7 以上を推奨)、測定データは CSV 形式で保存します。
最大・最小・平均値の、簡単な解析機能も有しています。

◆ 他の発汗測定機器との測定範囲比較

製品名	精神性発汗	軽度な発汗	激しい発汗
皮膚電気反応計・電位計	○	×	×
マイクロ発汗計	○	○	×
携帯型発汗計PPOS-01	○	○	○

■ 販売元

■ 販売代理店



〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3
幕張テクノガーデン CB棟3階 MBP 内
Tel: 043-296-1068 Fax: 043-296-8881
Mail: info@tech-next.co.jp
URL: https://tech-next.co.jp/